

Inserção do Guia do administrador do ZOLL® AED Plus®



Importante Este símbolo indica que a unidade AED Plus é equipada para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos. O unidade AED Plus sem esse símbolo não é equipada para o tratamento de pacientes pediátricos e *não funcionará* com os eletrodos pediátricos Pedi-padz® II. Para atualizar a unidade AED Plus para utilização com os eletrodos pediátricos ZOLL Pedi-padz II, contate a ZOLL Medical Corporation ou um distribuidor autorizado ZOLL para obter informações sobre o Kit de atualização pediátrica ZOLL AED Plus.

Se a unidade AED Plus for equipada para o tratamento de pacientes adultos e pediátricos, quando o cabo para eletrodos de adultos é conectado, a unidade AED Plus muda automaticamente para o modo adulto para a detecção de ritmo cardíaco e seleção automática de energia de choque (120 Joules, 150 Joules, 200 Joules) e emite o comando visual, *ELETRODOS ADULTOS* e emite três bipes. Quando é conectado o cabo de eletrodos pediátricos ZOLL Pedi-padz II, a unidade AED Plus muda automaticamente para o modo pediátrico para a detecção de ritmo cardíaco e a seleção automática de energia de choque (50 Joules, 70 Joules, 85 Joules) e emite o comando visual, *ELETRODOS PEDIÁTRICOS* e emite três bipes.

Aplicação dos eletrodos Pedi-padz II (recém-nascidos/crianças)


Prepare o paciente antes de aplicar os eletrodos Pedi-padz II.

Para a preparação do paciente:

1. Remova a roupa da região pectoral do paciente.
2. Verifique se o peito do paciente está seco.

Para aplicar os eletrodos Pedi-padz II:

1. Abra a embalagem do eletrodo e desdobre a embalagem interna de forma a expor os eletrodos. Coloque os eletrodos no paciente de acordo com as ilustrações na embalagem.
2. Remova o eletrodo redondo do respectivo material protetor e coloque-o no peito do paciente (conforme mostrado nas ilustrações na embalagem do eletrodo).
3. Segure a aba do eletrodo com uma mão e, com a outra aplique o eletrodo, gentilmente, sobre o peito do paciente, alisando-o e pressionando para fora o ar debaixo do eletrodo.
4. Vire o paciente de bruços, remova o eletrodo quadrado de sua respectiva proteção e coloque-o nas costas do paciente (conforme mostrado nas ilustrações da embalagem do eletrodo).
5. Segure a aba do eletrodo e, com a outra mão, aplique gentilmente, o eletrodo sobre a pele do paciente, alisando-o e pressionando para fora, o ar debaixo do eletrodo.
6. Vire o paciente de costas e siga as instruções do ZOLL AED Plus.

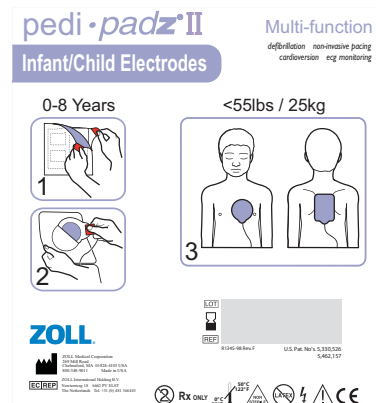

NOTA O Pedi-padz II (eletrodos de recém-nascidos/crianças) também pode ser usado com os produtos de marca-passo ZOLL para até uma hora de uso (consulte o *Guia do operador da M Series* para ver as informações sobre marca-passos).

Indicações de uso

Use o ZOLL AED Plus no caso de um paciente com suspeita de parada cardíaca apresentar PERDA DE CIRCULAÇÃO conforme indicado por:

- inconsciência,
- ausência de respiração normal e
- ausência de pulso ou sinais de circulação.

Quando o paciente tiver menos de 8 anos de idade e pesar menos de 25 kg, o ZOLL AED Plus deve ser usado com os eletrodos pediátricos ZOLL AED Plus. Não se deve retardar a terapia para determinar-se a idade ou peso exatos do paciente.